自動体外式除細動器 レスキューハート HDF-3500の使い方

1 [電源]ボタンを押します

◎念のため、「反応・呼吸の再確認」をしてください。




これより以下、音声ガイドに従って操作してください。

2 電極パッドを貼ります

・緑のつまみを引っ張り、パッドの袋を引き出します。
・袋を開けて、中からパッドを取出します。
・青い矢印を引き、パッドから裏のシートを剥がします。
・パッドを図のように胸とわき腹に貼ります。

◎心電図を解析します。身体には触れないでください。
解析中は、誰も傷病者に触れていないことを確認してください。

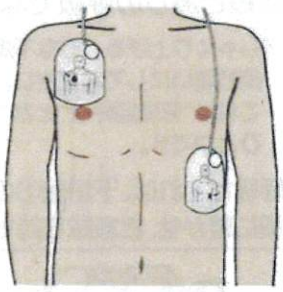

状　態	電気ショックが必要な場合	電気ショックが必要ない場合
音声ガイド	「体から離れてください。 電気ショックが必要です。」	「電気ショックは不要です。」

未就学児へ使用する場合
患者が未就学児の場合は、除細動パッドパックを装置から取り外し、未就学児専用除細動パッドパックを装着します。
ただし、未就学児専用除細動パッドパックが近くになく、やむをえない場合には2枚のパッドが触れ合わないように注意を払って、除細動パッドパックで代用してください。

3 [ショック]ボタンを押します

◎電気ショックが必要ないと判断された場合、[ショック]ボタンを押しても放電されません。



音声ガイド	「体から離れてください。オレンジ色のショックボタンを押してください。」 ※この音声ガイド後、20秒以内に[ショック]ボタンを押してください。 「電気ショックを行いました。」

※その後に続く音声ガイドに従って、胸骨圧迫を行ってください。

普段どおりの呼吸が戻った場合は、身体を横向きにして救急隊員の到着を待ちます。
（電極パッドは付けたままにしてください。）

外国特例承認取得者：HeartSine Technologies Limited (英国)
選任製造販売業者：**オムロン ヘルスケア株式会社**
TEL：0120-401-066（通話料無料）

H045-019-002-1